

**PRIDE**<sup>®</sup>  
MOBILITY



**Jazzy**  
ASSIST

**Quick Operation Guide**

## **Jazzy Assist Quick Operation Guide** ..... 01

Unfold  
Activate the battery (First use)  
Introduction to the Controller  
Connect to the App  
Charging Introduction  
Fold

## **Jazzy Assist Schnellanleitung** ..... 06

Ausklappen  
Aktivierung der Batterie (Erste Verwendung)  
Einführung in den Controller  
Verbindung zur App  
Einführung in das Laden  
Zusammenklappen

## **Guide d'Utilisation Rapide du Jazzy Assist** ..... 11

Dépliage  
Activer la batterie (Première utilisation)  
Présentation du Boîtier de Commande  
Connexion à l'Application  
Introduction à la Charge  
Pliage

## **Guía de Inicio Rápido de Jazzy Assist** ..... 16

Desplegar  
Activar la batería (Primer uso)  
Introducción al Controlador  
Conectar a la Aplicación  
Introducción a la Carga  
Plegar

# Jazzy Assist Quick Operation Guide




This Quick Operation Guide is intended to provide basic instructions for using the device and to help you quickly master its operation. For safe operation, please be sure to carefully read the **Product User Manual** before use.

# Unfold

---


- 1 Step on the folding footrest, lift the handle upwards and push it forward

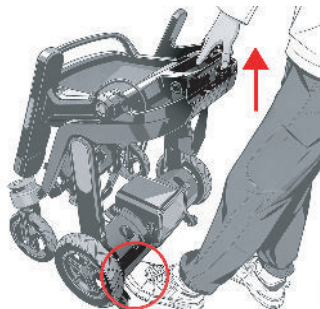


- 2 Open the backrest



- 3 Lift the armrests on both sides

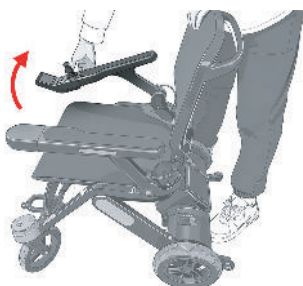

- 4 Lower the footrest

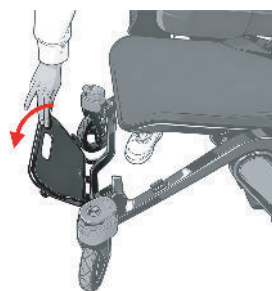

# Activate the battery (First use)


---

Press and hold the battery button for 3 seconds. The wheelchair can only be switched on after the battery has been activated.



# Introduction to the Controller

---

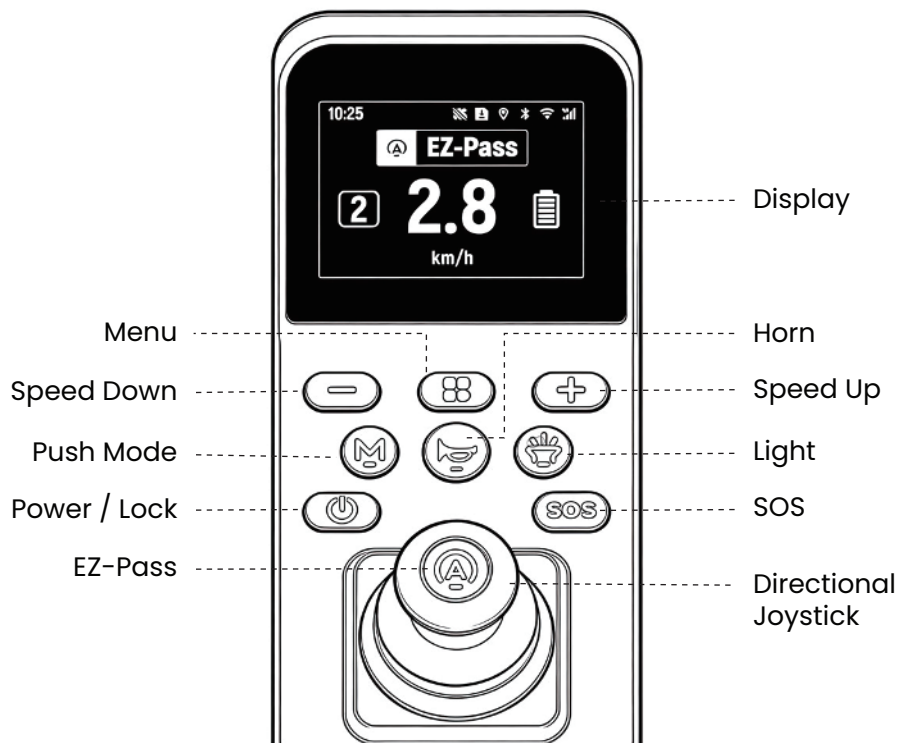

## Directional Joystick

When the wheelchair is powered on, move the joystick to control speed and direction. Pull the joystick backward to display the rear-view camera image on the screen.



## Power/Lock

Short press to power on. Press and hold for 3 seconds to power off. When powered on, short press to enter lock mode; the joystick is disabled.



## EZ-Pass

Short press to enable this mode. When enabled, it makes minor steering corrections to help Powered Wheelchair users pass through narrow doors or passages more easily. Short press again to disable this mode.



## Horn

Press to sound the horn.



## Light

Short press to turn the lights on or off.

## **SOS** SOS

Press and hold for 3 seconds to sound the alarm. Press and hold for 5 seconds to send an SMS message to the emergency contact (Only effective when the wheelchair is connected to the mobile app).

## **Menu**

Short press to enter the menu. Use the [speed up]/[speed down] buttons to switch pages. In the menu, press and hold the [speed down] button to display the exit prompt, then short press the [Menu] button to exit.

## **Speed Up**

Short press to increase by one level, up to a maximum of Level 5. In the menu, short press to go to the next page. On the volume adjustment screen, short press to increase volume.

## **Speed Down**

Short press to decrease by one level, down to Level 1. In the menu, short press to go to the previous page. On the volume adjustment screen, short press to decrease volume.

## **Push Mode**

Press and hold the [Push] button for 3 seconds to release the brakes so the powered wheelchair can be pushed manually. Short press the [Push] button or move the joystick to return to electric drive mode. You can change the button function in the app.

## **Connect to the App**

---

1. Scan the QR code to download and install the companion app for the Powered Wheelchair.



2. Open the app, then follow the in-app instructions to add the device.
3. For more information on additional features (such as SOS emergency assistance and app remote control), please refer to the app.

# Charging Introduction

## Method 1:

Connect the charger. Align the red dot on the plug with the red dot on the charging port under the armrest, and insert it in the same direction to start charging.




## Method 2:

Remove the battery. Align the red dot on the plug with the red dot on the battery charging port, and insert it in the same direction to start charging.



# Fold


1 Slightly lift the armrest, press and hold the lock release button, and lower the armrests on both sides

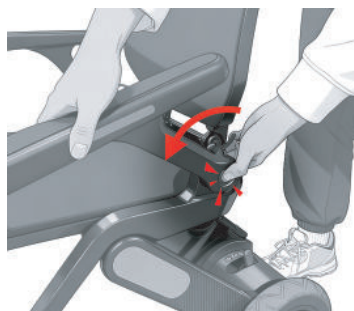

2 Step on the folding pedal, lift the backrest handle and then release your foot





3 Pull back the locking link and fold the backrest

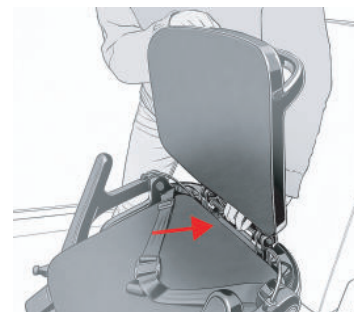

4 Retract the footrest (optional)



5 Pulling the locking mechanisms on both sides of the front support wheel allows the front support wheel to be bent backward (not mandatory)

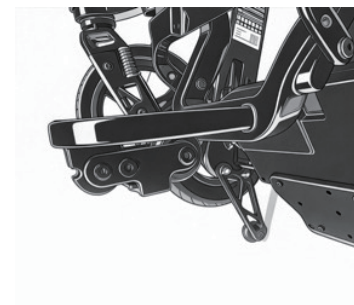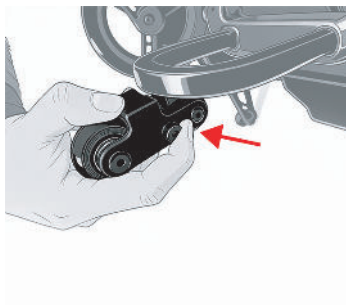

# Jazzy Assist Schnellanleitung




Diese Schnellanleitung soll grundlegende Anweisungen zur Verwendung des Geräts geben und Ihnen helfen, die Bedienung schnell zu erlernen. Für eine sichere Handhabung lesen Sie bitte vor der Verwendung unbedingt das **Benutzerhandbuch des Produkts** sorgfältig durch.


# Ausklappen

---


- 1 Treten Sie auf die Klapp-Fußstütze, heben Sie den Griff nach oben und schieben Sie ihn nach vorne.

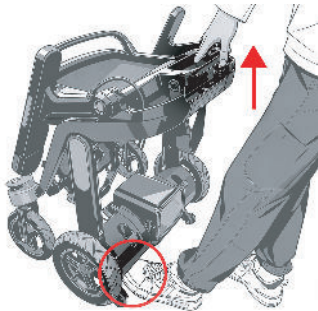


- 2 Klappen Sie die Rückenlehne auf.

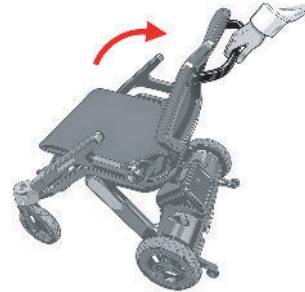

- 3 Heben Sie die Armlehnen auf beiden Seiten an.

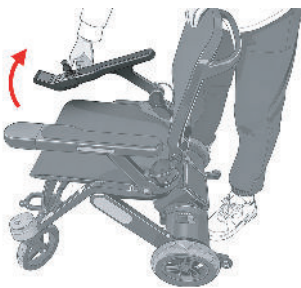

- 4 Senken Sie die Fußstütze.

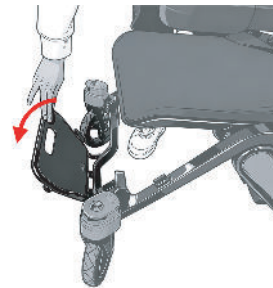


# Aktivierung der Batterie (Erste Verwendung)

---

Drücken und halten Sie die Batterie-Taste 3 Sekunden lang. Der Rollstuhl kann erst eingeschaltet werden, nachdem die Batterie aktiviert wurde.



# Einführung in den Controller

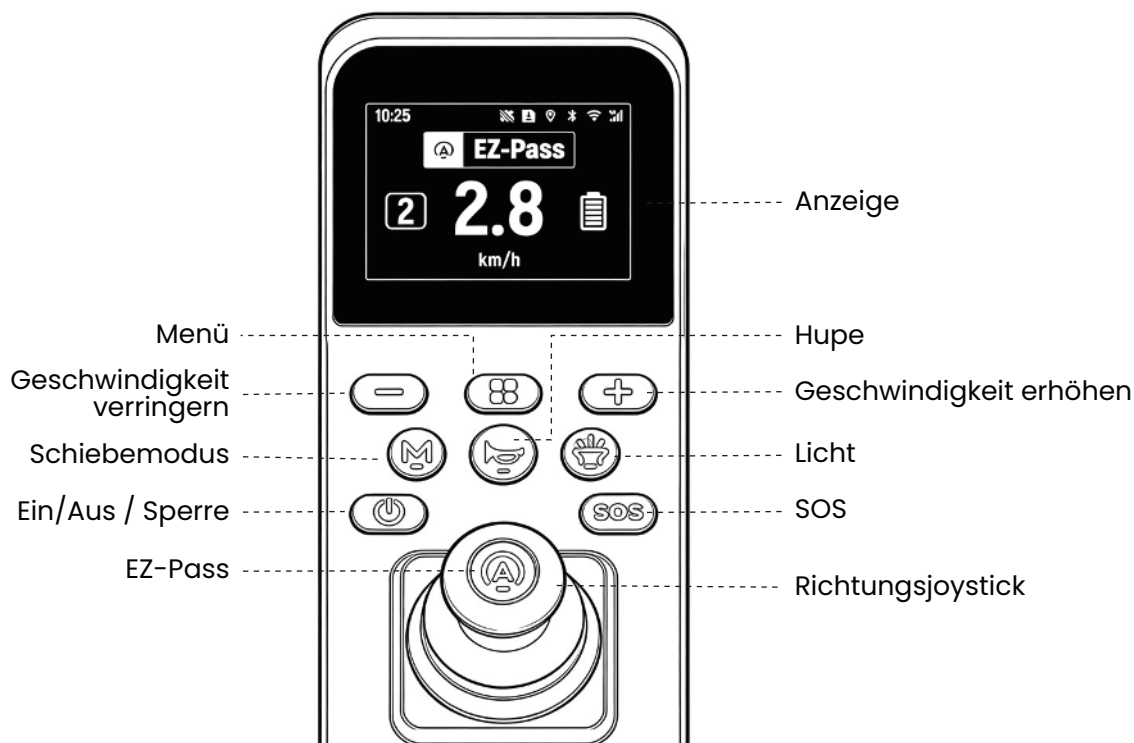

## Richtungsjoystick

Wenn der Rollstuhl eingeschaltet ist, bewegen Sie den Joystick, um Geschwindigkeit und Richtung zu steuern. Ziehen Sie den Joystick nach hinten, um das Bild der Rückfahrkamera auf dem Bildschirm anzuzeigen.



## Ein/Aus / Sperre

Kurzes Drücken zum Einschalten. Drücken und halten Sie 3 Sekunden, um auszuschalten. Wenn eingeschaltet, drücken Sie kurz, um in den Sperrmodus zu wechseln; der Joystick wird deaktiviert.



## EZ-Pass

Kurzes Drücken, um diesen Modus zu aktivieren. Wenn aktiviert, nimmt der Rollstuhl kleine Lenkkorrekturen vor, um den Nutzern zu helfen, leichter durch enge Türen oder Durchgänge zu fahren. Drücken Sie erneut, um den Modus zu deaktivieren.



## Hupe

Drücken Sie, um die Hupe zu betätigen.



## Licht

Kurzes Drücken, um das Licht ein- oder auszuschalten.

## **SOS** SOS

Drücken und halten Sie die Taste 3 Sekunden lang, um den Alarm auszulösen. Drücken und halten Sie die Taste 5 Sekunden lang, um eine SMS an den Notfallkontakt zu senden (nur wirksam, wenn der Rollstuhl mit der mobilen App verbunden ist).

## **Menü**

Kurzes Drücken, um das Menü zu öffnen. Verwenden Sie die Tasten [Geschwindigkeit Erhöhen]/[Geschwindigkeit Verringern], um die Seiten zu wechseln. Im Menü drücken und halten Sie die Taste [Geschwindigkeit Verringern], um den Ausstiegsdialog zu öffnen, und drücken Sie dann kurz die [Menü]-Taste, um das Menü zu verlassen.

## **+** Geschwindigkeit Erhöhen

Kurzes Drücken, um die Geschwindigkeit um eine Stufe zu erhöhen, bis zu einem Maximum von Stufe 5. Im Menü, kurzes Drücken, um zur nächsten Seite zu wechseln. Auf dem Lautstärkereglers-Bildschirm, kurzes Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.

## **–** Geschwindigkeit Verringern

Kurzes Drücken, um die Geschwindigkeit um eine Stufe zu verringern, bis zu Stufe 1. Im Menü, kurzes Drücken, um zur vorherigen Seite zu wechseln. Auf dem Lautstärkereglers-Bildschirm, kurzes Drücken, um die Lautstärke zu verringern.

## **M** Schiebemodus

Drücken und halten Sie die [Schiebemodus]-Taste für 3 Sekunden, um die Bremsen zu lösen, sodass der Rollstuhl manuell geschoben werden kann. Kurzes Drücken der [Schiebemodus]-Taste oder Bewegen des Joysticks, um in den Elektromodus zurückzukehren. Die Tastenfunktion kann in der App angepasst werden.

## Verbindung zur App

---

1. Scannen Sie den QR-Code, um die Begleit-App für den Rollstuhl herunterzuladen und zu installieren.



2. Öffnen Sie die App und folgen Sie den Anweisungen in der App, um das Gerät hinzuzufügen.

3. Weitere Informationen zu zusätzlichen Funktionen (wie SOS-Notfallhilfe und Fernsteuerung der App) finden Sie in der App.

# Einführung in das Laden

## Methode 1:

Schließen Sie das Ladegerät an. Richten Sie den roten Punkt am Stecker mit dem roten Punkt am Ladeanschluss unter der Armlehne aus und stecken Sie es in die gleiche Richtung, um mit dem Laden zu beginnen.




## Methode 2:

Entfernen Sie die Batterie. Richten Sie den roten Punkt am Stecker mit dem roten Punkt am Ladeanschluss der Batterie aus und stecken Sie es in die gleiche Richtung, um mit dem Laden zu beginnen.



# Zusammenklappen


- 1 Heben Sie die Armlehne leicht an, drücken und halten Sie die Entriegelungstaste und senken Sie die Armlehnen auf beiden Seiten.

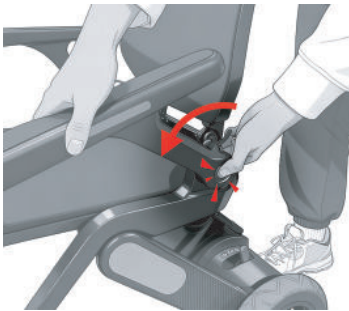

- 2 Treten Sie auf das Klapppedal, heben Sie den Rückenlehnengriff an und lassen Sie dann den Fuß los.





- 3 Ziehen Sie das Verriegelungselement zurück und klappen Sie die Rückenlehne zusammen.

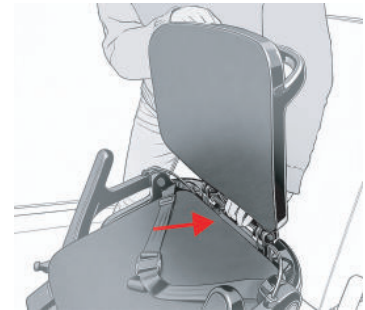

- 4 Falten der Fußstütze (optional)



- 5 Durch Ziehen der Verriegelungsmechanismen auf beiden Seiten des Vorderradstützrades kann das Vorderradstützrad nach hinten gebogen werden (nicht zwingend erforderlich).

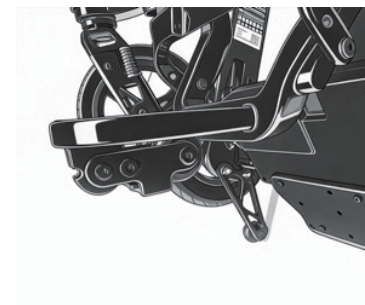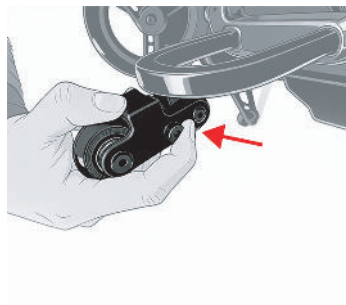

# Guide d'Utilisation Rapide du Jazzy Assist




Ce guide d'utilisation rapide est destiné à fournir les instructions de base pour l'utilisation de l'appareil et à vous aider à maîtriser rapidement son fonctionnement. Pour une utilisation en toute sécurité, lire attentivement le **Manuel de l'Utilisateur** avant toute utilisation.


## Dépliage

---


- 1 Appuyer sur le repose-pieds de pliage, soulever la poignée vers le haut et la pousser vers l'avant.

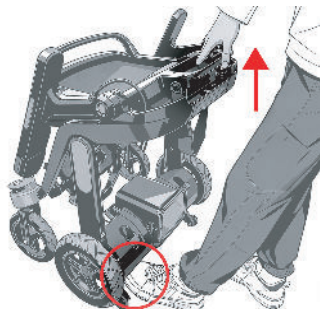


- 2 Ouvrir le dossier.

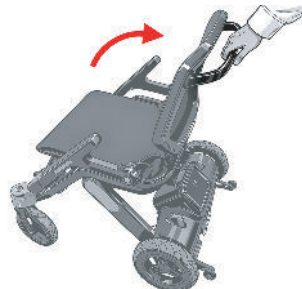

- 3 Soulever les accoudoirs des deux côtés.

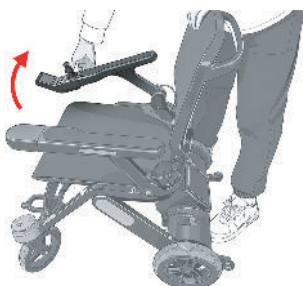

- 4 Abaisser le repose-pieds.

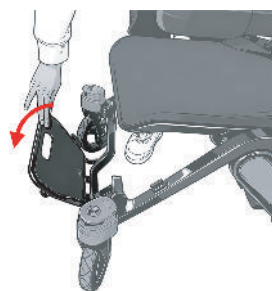


## Activer la batterie (Première utilisation)

---

Appuyer sur le bouton de la batterie pendant 3 secondes. Le fauteuil roulant ne peut être allumé qu'après activation de la batterie.



# Présentation du Boîtier de Commande

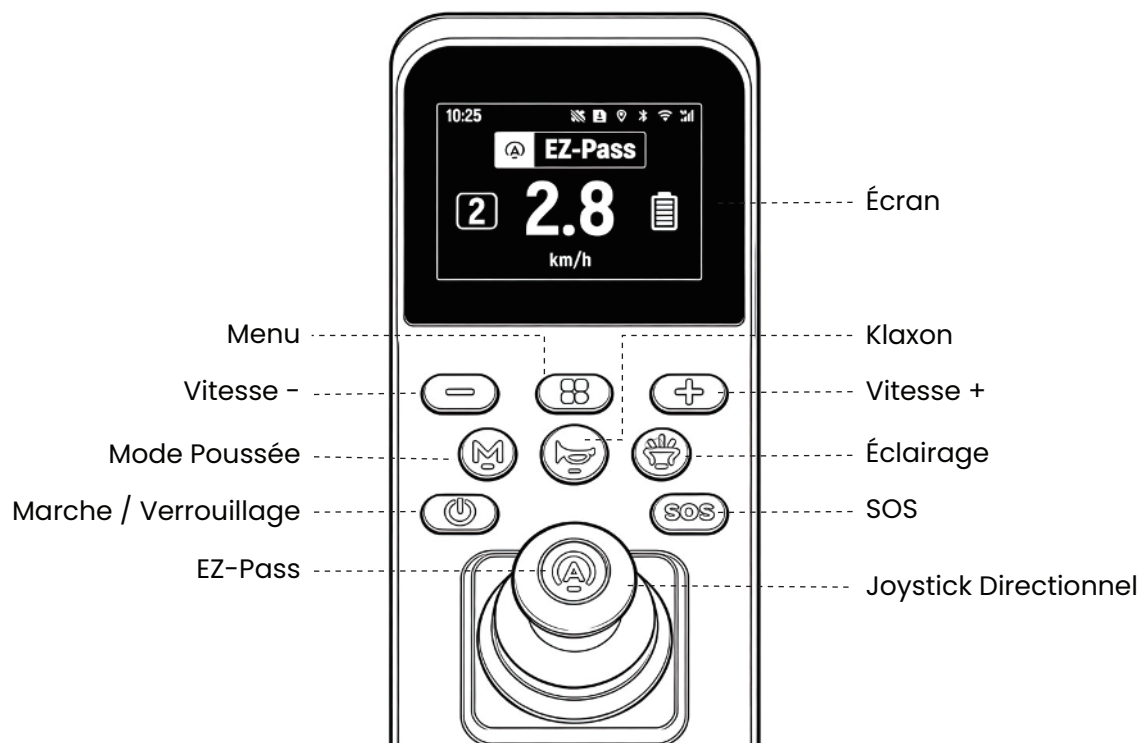

## Joystick Directionnel

Lorsque le fauteuil roulant est sous tension, déplacer le joystick pour contrôler la vitesse et la direction. Tirer le joystick vers l'arrière pour afficher l'image de la caméra de recul sur l'écran.



## Marche / Verrouillage

Appui court pour mettre sous tension. Appui long (3 s) pour éteindre. En fonctionnement, appui court pour verrouiller ; le joystick est désactivé.



## EZ-Pass

Appui court pour activer ce mode. Une fois activé, il effectue de petites corrections de direction pour aider l'utilisateur à passer plus facilement dans des portes ou passages étroits. Un nouvel appui court désactive le mode.



## Klaxon

Appuyer pour actionner le klaxon.



## Éclairage

Appui court pour allumer ou éteindre les feux.

## **SOS** SOS

Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour déclencher l'alarme. Appuyez et maintenez enfoncé pendant 5 secondes pour envoyer un SMS au contact d'urgence (uniquement valable lorsque le fauteuil roulant est connecté à l'application mobile).

## **Menu**

Appui court pour accéder au menu. Utiliser les boutons [Vitesse +] / [Vitesse -] pour changer de page. Dans le menu, appui long sur [Vitesse -] pour ouvrir l'invite de sortie, puis appui court sur [Menu] pour quitter.

## **Vitesse +**

Appui court pour augmenter d'un niveau, jusqu'au Niveau 5 maximum. Dans le menu, appui court pour passer à la page suivante. Sur l'écran de réglage du volume, appui court pour augmenter le volume.

## **Vitesse -**

Appui court pour diminuer d'un niveau, jusqu'au niveau 1. Dans le menu, appui court pour passer à la page précédente. Sur l'écran de réglage du volume, appui court pour diminuer le volume.

## **Mode Poussée**

Appui long sur le bouton [Poussée] (3 s) pour libérer les freins afin de pouvoir pousser manuellement le fauteuil. Appui court sur [Poussée] ou déplacement du joystick pour revenir en mode électrique.

## Connexion à l'Application

---

1. Scanner le code QR pour télécharger et installer l'application compagnon du fauteuil roulant.



2. Ouvrir l'application, puis suivre les instructions pour ajouter l'appareil.

3. Pour plus d'informations sur les fonctionnalités supplémentaires (assistance d'urgence SOS, télécommande via l'application, etc.), se référer à l'application.

# Introduction à la Charge

## Méthode 1:

Brancher le chargeur. Aligner le point rouge de la fiche avec le point rouge du port de charge sous l'accoudoir, et insérer dans le même sens pour commencer la charge.




## Méthode 2:

Retirer la batterie. Aligner le point rouge de la fiche avec le point rouge du port de charge de la batterie, et insérer dans le même sens pour commencer la charge.



# Pliage


- 1 Soulever légèrement l'accoudoir, appuyer sur le bouton de déverrouillage et maintenir, abaisser les accoudoirs des deux côtés.

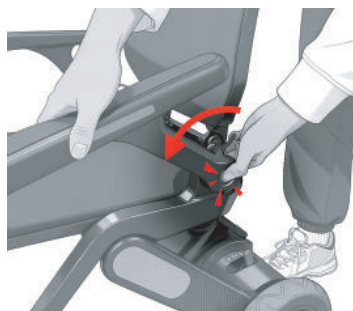

- 2 Appuyer sur la pédale de pliage, soulever la poignée du dossier puis relâcher le pied.





- 3 Tirer la biellette de verrouillage et replier le dossier.

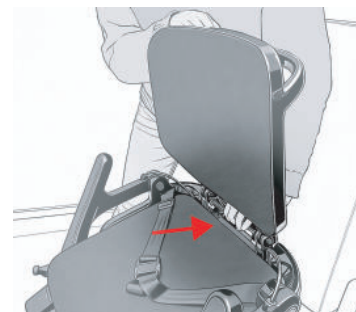

- 4 Rétracter le repose-pieds (optionnel).



- 5 Tirer les mécanismes de verrouillage des deux côtés de la roulette avant de soutien pour permettre à celle-ci de se replier vers l'arrière (non obligatoire).

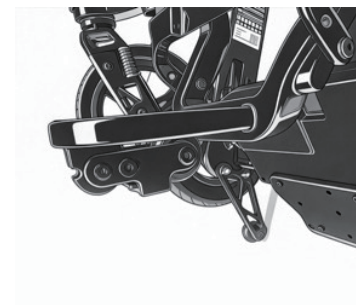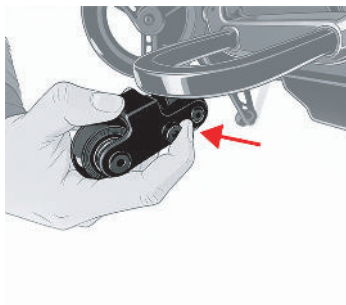

# Guía de Inicio Rápido de Jazzy Assist




Esta Guía Rápida de Operación tiene como objetivo proporcionar instrucciones básicas para el uso del dispositivo y ayudarle a familiarizarse rápidamente con su uso. Para un uso seguro, asegúrese de leer cuidadosamente el **Manual de Usuario del Producto** antes de utilizarlo.


## Desplegar

---


- 1 Pise el pedal de plegado, levante el asa hacia arriba y empújela hacia adelante

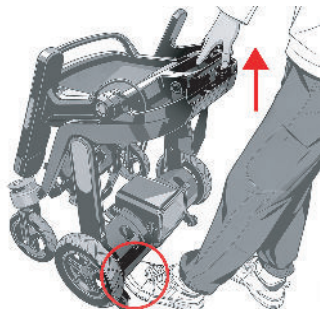


- 2 Abra el respaldo

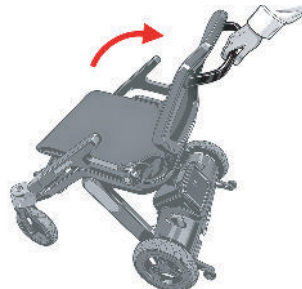

- 3 Levante los reposabrazos en ambos lados

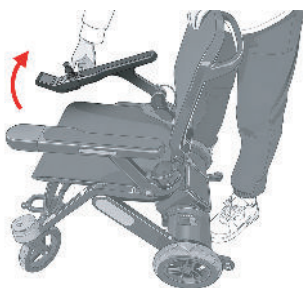

- 4 Baje el reposapiés

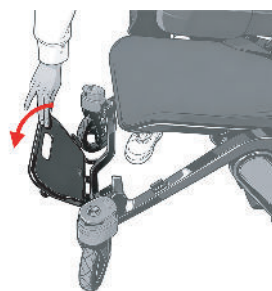


## Activar la batería (Primer uso)

---

Mantenga presionado el botón de la batería durante 3 segundos. La silla de ruedas solo puede encenderse después de que la batería haya sido activada.



# Introducción al Controlador

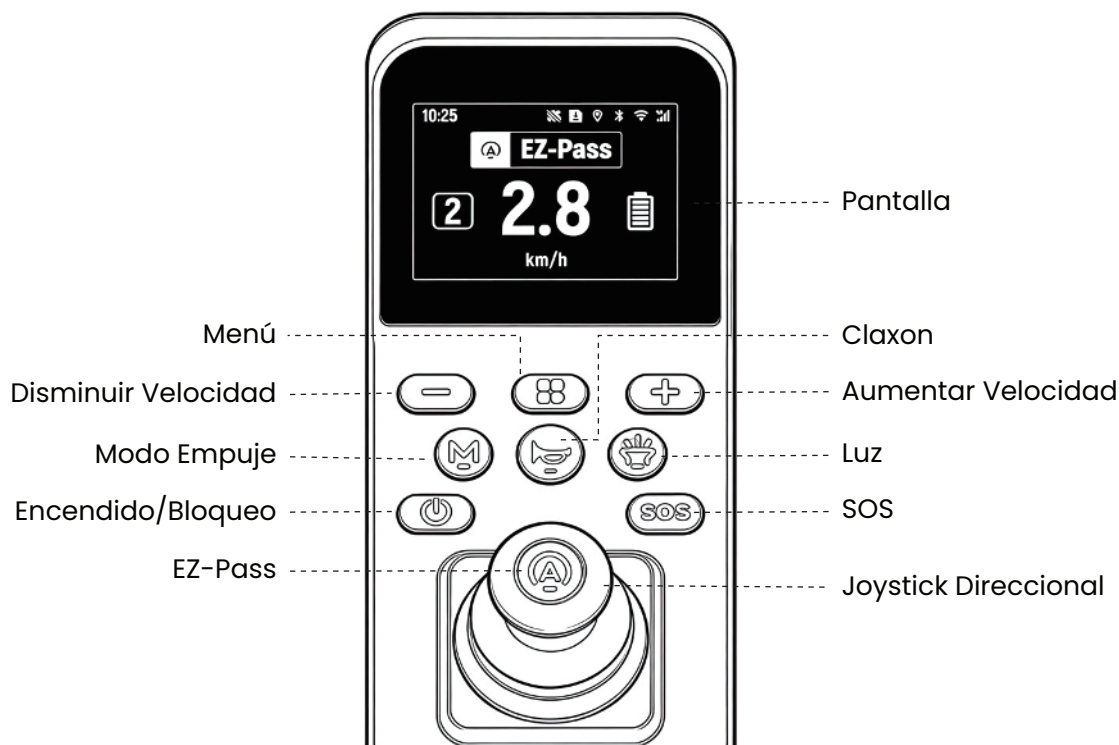

## Joystick Direccional

Cuando la silla de ruedas esté encendida, mueva el joystick para controlar la velocidad y la dirección. Tire del joystick hacia atrás para mostrar la imagen de la cámara de visión trasera en la pantalla.



## Encendido/Bloqueo

Presione brevemente para encender. Mantenga presionado durante 3 segundos para apagar. Cuando esté encendida, presione brevemente para entrar en modo de bloqueo; el joystick queda deshabilitado.



## EZ-Pass

Presione brevemente para activar este modo. Cuando está activado, realiza pequeños ajustes de dirección para ayudar a los usuarios de la silla de ruedas a pasar por puertas o pasillos estrechos más fácilmente. Presione brevemente de nuevo para desactivar este modo.



## Claxon

Presione para hacer sonar el claxon.



## Luz

Presione brevemente para encender o apagar las luces.

## **SOS** SOS

Mantenga pulsado durante 3 segundos para activar la alarma. Mantenga pulsado durante 5 segundos para enviar un SMS al contacto de emergencia (solo efectivo cuando la silla de ruedas está conectada a la aplicación móvil).

## **Menú**

Presione brevemente para entrar en el menú. Use los botones [Aumentar velocidad]/[Disminuir velocidad] para cambiar de página. En el menú, mantenga presionado el botón [Disminuir velocidad] para mostrar la opción de salida, luego presione brevemente el botón [Menú] para salir.

## **+ Aumentar Velocidad**

Presione brevemente para aumentar un nivel, hasta un máximo de Nivel 5. En el menú, presione brevemente para ir a la siguiente página. En la pantalla de ajuste de volumen, presione brevemente para aumentar el volumen.

## **– Disminuir Velocidad**

Presione brevemente para disminuir un nivel, hasta el Nivel 1. En el menú, presione brevemente para ir a la página anterior. En la pantalla de ajuste de volumen, presione brevemente para disminuir el volumen.

## **M Modo Empuje**

Mantenga presionado el botón [Empuje] durante 3 segundos para liberar los frenos y permitir que la silla de ruedas sea empujada manualmente. Presione brevemente el botón [Empuje] o mueva el joystick para volver al modo de conducción eléctrica.

## **Conectar a la Aplicación**

---

1. Escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación complementaria de la silla de ruedas.



2. Abra la aplicación, luego siga las instrucciones dentro de la aplicación para añadir el dispositivo.

3. Para más información sobre funciones adicionales (como asistencia de emergencia SOS y control remoto desde la aplicación), consulte la aplicación.

# Introducción a la Carga

## Método 1:

Conecte el cargador. Alinee el punto rojo del enchufe con el punto rojo del puerto de carga debajo del reposabrazos, e insértelo en la misma dirección para iniciar la carga.




## Método 2:

Retire la batería. Alinee el punto rojo del enchufe con el punto rojo del puerto de carga de la batería, e insértelo en la misma dirección para iniciar la carga.



# Plegar


1 Levante ligeramente el reposabrazos, mantenga presionado el botón de liberación del bloqueo y baje los reposabrazos en ambos lados.

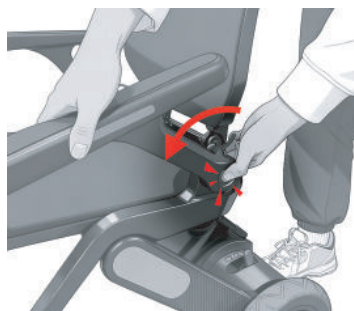

2 Pise el pedal de plegado, levante el asa del respaldo y luego retire el pie.





3 Tire de la biela de bloqueo y pliegue el respaldo.

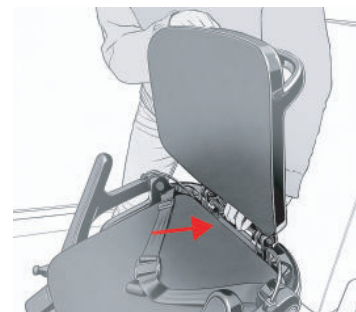

4 Repliegue el reposapiés (opcional)



5 Tire de los mecanismos de bloqueo en ambos lados de la rueda de apoyo delantera para plegarla hacia atrás (no obligatorio)

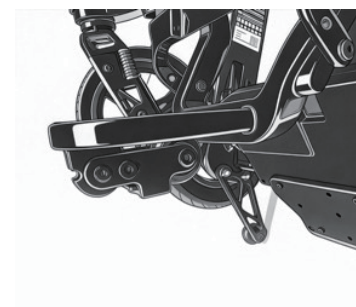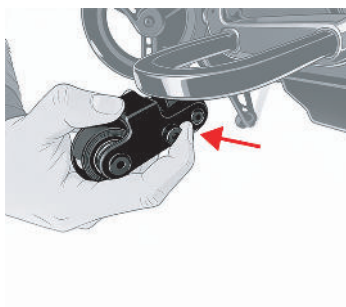





## UK

Pride Mobility Products Ltd.  
32 Wedgwood Road Bicester,  
Oxfordshire OX26 4UL, United Kingdom  
**[www.pride-mobility.co.uk](http://www.pride-mobility.co.uk)**

## Germany

Pride Mobility Products GmbH  
Josef-Förster-Str.6-8  
D-33161 Hövelhof, Germany  
**[www.pridemobility.de](http://www.pridemobility.de)**

## France

Pride Mobility Products France  
26 Rue Monseigneur Ancel  
69800 Saint-Priest  
**[www.pridemobility.fr](http://www.pridemobility.fr)**

## Spain

Pride Mobility Products Spain SLU  
Calle Las Minas Número 67  
Polígono Industrial Urtinsa II, de  
Alcorcón  
28923 Madrid  
**[pridemobility.eu/](http://pridemobility.eu/)**